

INSTRUKCJA POBRANIA

TEST GENETYCZNY



WAŻNE

W przypadku pobierania różnych próbek materiału biologicznego krew pobierana jest zawsze jako ostatnia

Material

Do pobrania wymazu, należy użyć:

- 1 wymazówka
- 1 probówka z niebieską nakrętką



WAŻNE

Probówki nie wolno płukać.

Zawiera ona tiocyjanian guanidyny, niezbędny do przeprowadzenia badania.

– Nie jeść, nie pić, nie palić ani nie żuć gumy na 30 minut przed pobraniem próbki śliny.




KROK 1

Opisz probówkę podając swoje **imię i nazwisko, datę i godzinę pobrania wymazu.**




KROK 2

Dokładnie umyj ręce.

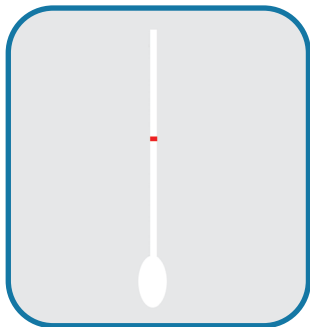


KROK 3

Otwórz sterylne opakowanie i wyjmij wymazówkę.
Uważaj, aby nie dotknąć końcówki wymazówki palcami.

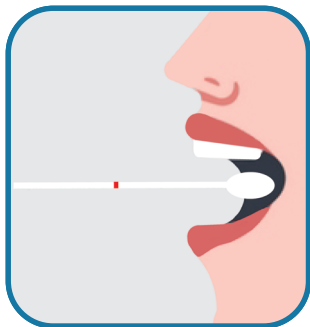


KROK 4

Włóż wymazówkę do ust i **pocieraj wewnętrzną stronę policzków przez 1 do 2 minut**.

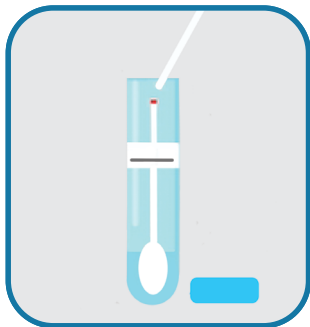

KROK 5

Umieść wymazówkę w probówce i **złam jej trzonek w miejscu oznaczonym czerwoną kreską**.

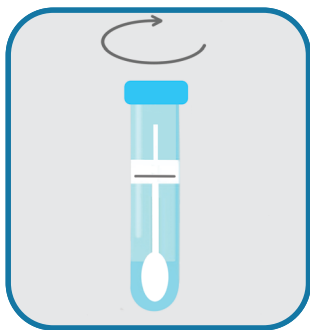

KROK 6

Zamknij szczelnie probówkę i umieść ją w przeznaczonym do tego woreczku. **Nie zapomnij dołączyć do wysyłki zgody na badanie genetyczne.**